

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

ワイデックス 総合支援法補聴器カタログ

2021.08



総合支援法について

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級(詳細は後述)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

補聴器支給までの流れ

■ 身体障害者手帳の取得

- 1.お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
- 2.指定の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受け、「手帳交付の意見書」を交付してもらう。
- 3.「手帳交付の意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口へ提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
- 4.障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。

■ 補聴器の支給

- 5.指定の耳鼻咽喉科判定医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。
- 6.総合支援法取扱の補聴器販売店に「見積書」の作成を依頼する。
- 7.下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
 - ・ 申請書(市区町村の福祉課窓口)
 - ・ 補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)
 - ・ 見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)
- 8.補聴器支給の適否について判定後「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。
- 9.「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

・ 上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

身体障害者障害程度等級表 障害等級 身体障害者福祉法抜粋

級別	障害の状態
2級	重度難聴用
3級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均100デシベル以上」のもの(両耳全ろう)
4級	高度難聴用
6級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均90デシベル以上」のもの(耳介に接しなれば大声語を理解し得ないもの)
	1.両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均80デシベル以上」のもの(耳介に接しなれば話声語を理解し得ないもの)
	2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
	1.両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均70デシベル以上」のもの(40cm以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの)
	2.一側耳の聴力レベルが「平均90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「平均50デシベル以上」のもの

・原則として2級、3級に重度難聴用、4級、6級に高度難聴用が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

補聴器購入基準価格表

2021年4月1日現在

名称	基本構造	価格
高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上	¥41,600
高度難聴用 耳かけ型	② JIS C 5512-2015による。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が130デシベル未満のもの。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。	¥43,900
重度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。	¥55,800
重度難聴用 耳かけ型	② JIS C 5512-2015による。90デシベル最大出力音圧の最大値(ピーク値)の公称値が130デシベル以上のもの。その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。	¥67,300
耳あな型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	¥87,000
耳あな型 (オーダーメイド)		¥137,000
骨導式 ポケット型	IEC 60118-9(1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	¥70,100
骨導式 眼鏡型		¥120,000

- ・自己負担額は、原則1割負担。ただし、所得によっては例外もあり。
- ・耐用年数は5年。
- ・価格は、電池、骨導用シーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
- ・身体の障害状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
- ・平面レンズを必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ・重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオチュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
- ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

ENJOY50 [エンジョイ50] 耳かけ型


高度難聴用耳かけ型

E-FM E05G

・プログラムボタン付

生活防水
IP68

PR41
(312)

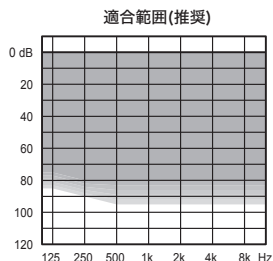


E-FA E05G

・ボリュームコントロール付
・プログラムボタン付
・テレコイル標準装備

生活防水
IP68

PR41
(312)

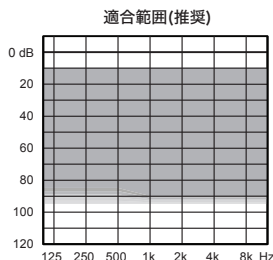


E-FP E05G

・ボリュームコントロール付
・プログラムボタン付
・テレコイル標準装備

生活防水
IP68

PR48
(13)

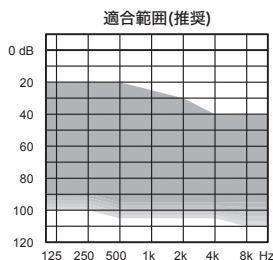

耳かけ型補聴器 ENJOY 301AFBZX00042000

チャンネル数

4

保証

1年

選べるカラーケース (全6色) ※全モデル共通



※耳かけ型のカスタマイズチップ/イヤモールドは別売です。(取り扱い店にお問い合わせください)

※カラーケースの画像はFMモデルのものです。 ※()はカラー識別番号です。

装着イメージ



FM



FA



FP

主な搭載機能



トゥルー インพุット テクノロジー
入力音の限界値を113dBまで拡張。劣化の少ない音質、音声情報を維持します。



SIS 語音強化システム
話し声と騒音が混在している環境下で、騒音を抑えつつ話し声を強調して伝えてくれます。



ソフトレベル 騒音抑制
生活の中で小さくわずらわしい音を抑えて言葉をより聴き取りやすくしてくれます。



ロケーター
周囲の環境に合わせて、マイクが音を拾う範囲を自動的に調整します。



リスニング プログラム
使用環境に応じて、聞こえ方のプログラム切替ができます。3プログラム搭載。



スマートスピーク
電池切れの警告や、補聴器のプログラムの状態などを音声(日本語)で案内します。



インターイヤー
左右の補聴器が無線で情報を交換しながら連携して働き、聞こえを向上させます。



サウンド ダイアリー
ユーザーの日常の音環境を自動的に記録し、次のフィッティングに役立てます。



スマホで補聴器をコントロール TONELINK [トーンリンク]アプリ

自分のスマートフォンで補聴器の音量調節や聞こえの切替が簡単にできます。わざわざ専用のリモコンを持ち歩く必要はありません。

※メニュー スーパーパワーは非対応

主な機能

- ・音量調節
- ・プログラムの切替
- ・消音
- ・聞きたい方向の切替



※iPhone6s以降(iOS13.3以降)、Android 7.0以降で対応。

※スマートフォンの機種により利用できない場合がありますので予めご確認ください。

DEXリモコン対応

RC-DEX: 22,000円(税込)

音量調節やプログラム切替が簡単にできるコンパクトで使いやすい持ち運びに便利なりモコン。

※DEXリモコンは総合支援法の対象外となります。




MENU SUPER POWER [メニュー スーパーパワー] 耳かけ型

重度難聴用耳かけ型

ME5-SPG

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備

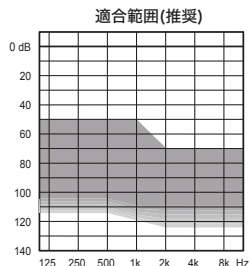

チャンネル数

5

保証

1年

RC4リモコン対応

音量調節やプログラム切替
が手元で簡単にできるリモコン。
RC4-1: シンプル機能で簡単操作
RC4-2: 多彩な機能を搭載
各22,000円(税込)

※RC4リモコンは総合支援法の対象外となります。



RC4-1



RC4-2

装用イメージ



SPG

主な搭載機能



SIS 語音強化システム

話し声と騒音が混在している環境
下で、騒音を抑えつつ話し声を強
調して伝えてくれます。



オーティビリティ エクステンダー

音量を大きくしても聞こえない
高音域を、聞こえる音域(低
音部)に移行して再生します。



リスニング プログラム

使用環境に応じて、聞こえ方
のプログラム切替ができます。
3プログラム搭載。



サウンド ダイアリー

ユーザーの日常の音環境を
自動的に記録し、次回の
フィッティングに役立てます。

選べるカラーケース (全5色)



ウォーム ベージュ
(021) (標準色)



ブラウン
(022)



キャンディーブルー
(009)



キャンディースモーク
(011)



キャンディーレッド
(013)

※ キャンディーカラーのケース形状は、
ME5-SPGとは異なります。

※ ()内はカラー識別番号です。

耳かけ型補聴器 MENU SUPER 228AFBZX00006000

補聴器の基本構造について

- ・本カタログ掲載の総合支援法対象補聴器の基本構造については、JIS C 5512:2000に準拠した性能を基にしています。(P3参照)
併せてJIS C 5512:2015に準拠した性能一覧も記載します。

JIS C 5512:2000に準拠した性能一覧表

シリーズ名	器 種 名	90dB 入力最大出力 (dB SPL)			(50dB 入力) 最大音響利得 2500Hz(dB)	誘導コイル 最大感度 2500Hz(dB)	使用電池	電池寿命 連続時間 (約)
		500Hz	2500Hz	ピーク値 (以下)				
総合支援法 ENJOY	E-FM E05G	124	128	138	58	—	PR41(312)	140h
	E-FA E05G(VC付)	126	135	139	67	96	PR41(312)	140h
	E-FP E05G(VC付)	129	133	139	70	100	PR48(13)	240h
総合支援法 MENU SP	ME5-SPG(VC付)	134	141	147	77	107	PR44(675)	500h

JIS C 5512:2015に準拠した性能一覧表

シリーズ名	器 種 名	90dB 入力最大出力 (dB SPL)		最大 音響利得	誘導コイル 最大感度	使用電池	電池寿命 連続時間 (約)
		HFA- OSPL90	最大 OSPL90				
総合支援法 ENJOY	E-FM E05G	123	130	54	—	PR41(312)	140h
	E-FA E05G(VC付)	126	133	59	89	PR41(312)	140h
	E-FP E05G(VC付)	128	135	65	97	PR48(13)	240h
総合支援法 MENU SP	ME5-SPG(VC付)	134	138	76	103	PR44(675)	500h

※耳かけ型のカスタムイヤチップ/イヤモールドは別売です。(取り扱い店にお問い合わせください)

※VCはボリュームコントロールのことです。

※電池寿命は、補聴器の設定や使用状況によって変わることがあります。また、季節によっても変化することがあります。(1日当たりの使用時間が短い場合、冬季などの低温で乾燥した条件で使用した場合、電池寿命は表示より短くなる場合があります)

※他の機器と通信して使用した場合、電池寿命が短くなります。

※補聴器は非課税です。



ワイデックスを選ぶこと。それは、「WindMade」認定企業の製品を選ぶということ。「WindMade」とは、風力による発電を採用する企業に与えられる世界で初めての消費者向けマークです。

補聴器保証制度

ワイデックス補聴器を安心してお使いいただくために、当社またはお買上げ店では、下記の内容を保証いたします。

1年間の無償保証

保証期間内に生じた自然故障についての修理は、無償で対応致します。

※電池などの消耗品、また耳せんなどの付属品は保証の対象外となりますのでご了承ください。

※有償オプションの1年延長保証・紛失補償は対象外となります。

有償修理

保証の有無にかかわらず、修理の際は、当社またはお買上げ店までお問い合わせください。

このような症状がある方は、耳鼻科の専門医に補聴器のご使用についてご相談ください。

- ・ 耳の手術を受けたことがある。
- ・ 耳だれ、耳なり、耳の痛み、目まいなどの自覚症状がある。
- ・ 中耳炎を患っている。耳あかが大量に出る。聴力が急激に衰えた。

補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察を受けられることをお勧めします。

補聴器は個々の難聴や聞こえの程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要で、適切なフィッティングによってその効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。



ワイデックス株式会社

本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9

リバーサイド隅田セントラルタワー

補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル:

TEL ☎ 0120-332-604 FAX ☎ 0120-332-394

<https://japan.widex.com/>

製造販売元 ワイデックス株式会社

許可番号 13B2X00020,13BZ006202 管理医療機器

補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。

AD-BIC/202108 8000

- ・ 製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
- ・ カタログに掲載されている製品の色は印刷により実際と多少異なる場合があります。
- ・ このカタログの内容は2021年8月現在のものです。

